

LIBIFY Notrufsystem



Inbetriebnahme | Kurzanleitung | wichtige Hinweise | Umbauanleitung



**Zu Ihrer Sicherheit
bitte aufmerksam lesen!**

Inhaltsverzeichnis


Lieferumfang	3
Gerät aktivieren	4
Verwendung zu Hause	6
Verwendung unterwegs	7
Mobilgerät – Details und Leuchtanzeigen	8
Ladestation – Details und Leuchtanzeigen	10
Funkarmband – Details und Leuchtanzeigen	12
Umbauanleitung Funkarmband	14

Lieferumfang

 Handsender



 Ladestation

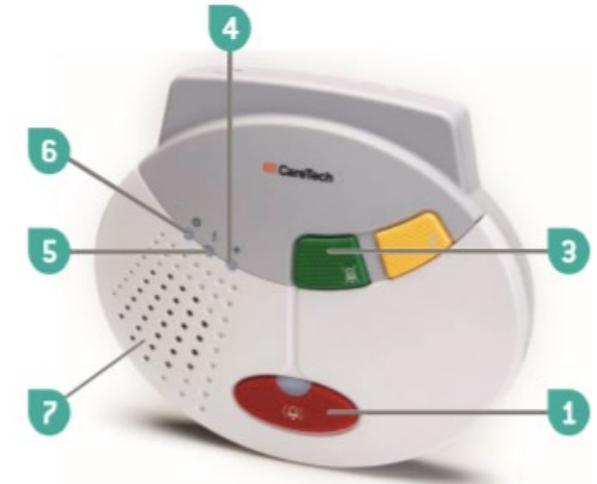

1 Notruf-Taste

2 Armband-LED

3 Notruf-Abbrechen-Taste

4 Status-Anzeige


5 Fehler-Anzeige

6 Stromnetz-Anzeige

7 Lautsprecher



Aufbauanleitung

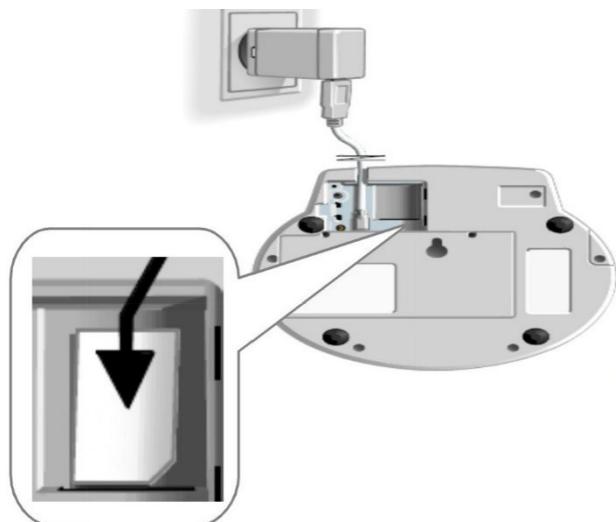


Suchen Sie sich einen Platz an dem Ihr neuer Hausnotruf künftig stehen soll. Wählen Sie diesen Platz nach folgenden Kriterien:

- bestmöglicher Mobilfunkempfang
- zentrale Stelle Ihrer Wohnung/ Ihres Hauses um möglichst alle Räume zu erreichen

Verbinden Sie dann das angeschlossene Netzteil mit einer Steckdose, öffnen Sie die mit dem roten Punkt gekennzeichnete Abdeckung auf der Rückseite der Basisstation um die vorbereitete SIM-Karte, durch einen leichten Druck, weiter einzuschieben. Dieser Schritt aktiviert Ihren neuen Hausnotruf.

Sie haben Ihren neuen Hausnotruf erfolgreich angeschlossen!

Achten Sie jetzt nur noch darauf, dass die Statuslampen auf der Vorderseite der Basisstation, die im Bild ersichtliche Kombination anzeigen. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

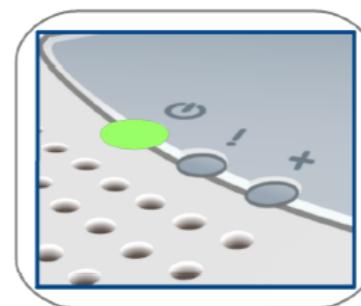

Drücken Sie die rote Taste der Basisstation bei Fragen oder allgemeinen Anliegen oder wählen Sie telefonisch: 0621 5490 1812

Lösen Sie jetzt einen Alarm über Ihren Handsender aus, Ihre Hausnotrufzentrale meldet sich dann über den Lautsprecher bei Ihnen.



Funkarmband – Details



Funktionen


Notruf auslösen:

Notruf-Taste ① drücken

- ▶ Die Armband-LED ② leuchtet rot auf
- ▶ Der Handsender ist zum Baden und Duschen geeignet
- ▶ Die Batteriebensdauer des Handsenders beträgt ca. 2 Jahre
- ▶ Die Reichweite zur Basisstation beträgt außerhalb von Gebäuden ca. 250 Meter und innerhalb von Gebäuden ca. 30 Meter

- 1 Notruf-Taste
- 2 Armband-LED

Ladestation – Details

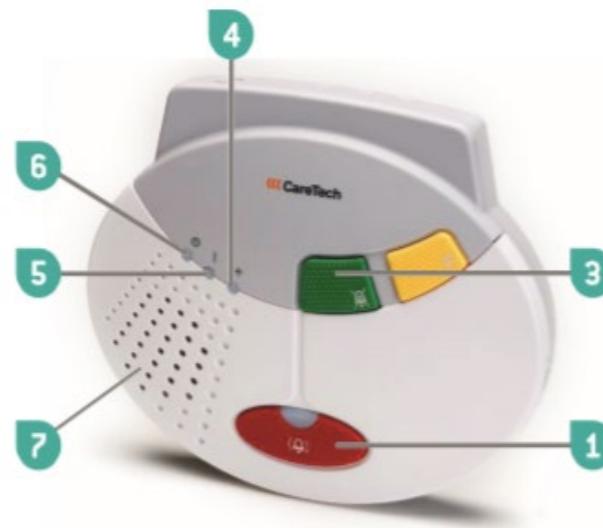

Funktionen

Notruf auslösen:

Notruf-Taste ① drücken

- ▶ Die Taste blinkt rot sobald Sie einen Notruf ausgelöst haben


Notruf abbrechen:

- ▶ Notruf-Abbrechen-Taste ③ drücken, um den Notruf abzubrechen. Danach leuchtet die Notruf-Taste ① wieder durchgehend.

- 1 Notruf-Taste
- 3 Notruf-Abbrechen-Taste
- 5 Fehler-Anzeige
- 7 Lautsprecher
- 4 Status-Anzeige
- 6 Stromnetz-Anzeige

Symbole und Anzeigen

Auf der Vorderseite von CareIP befinden sich die folgenden Anzeigen:

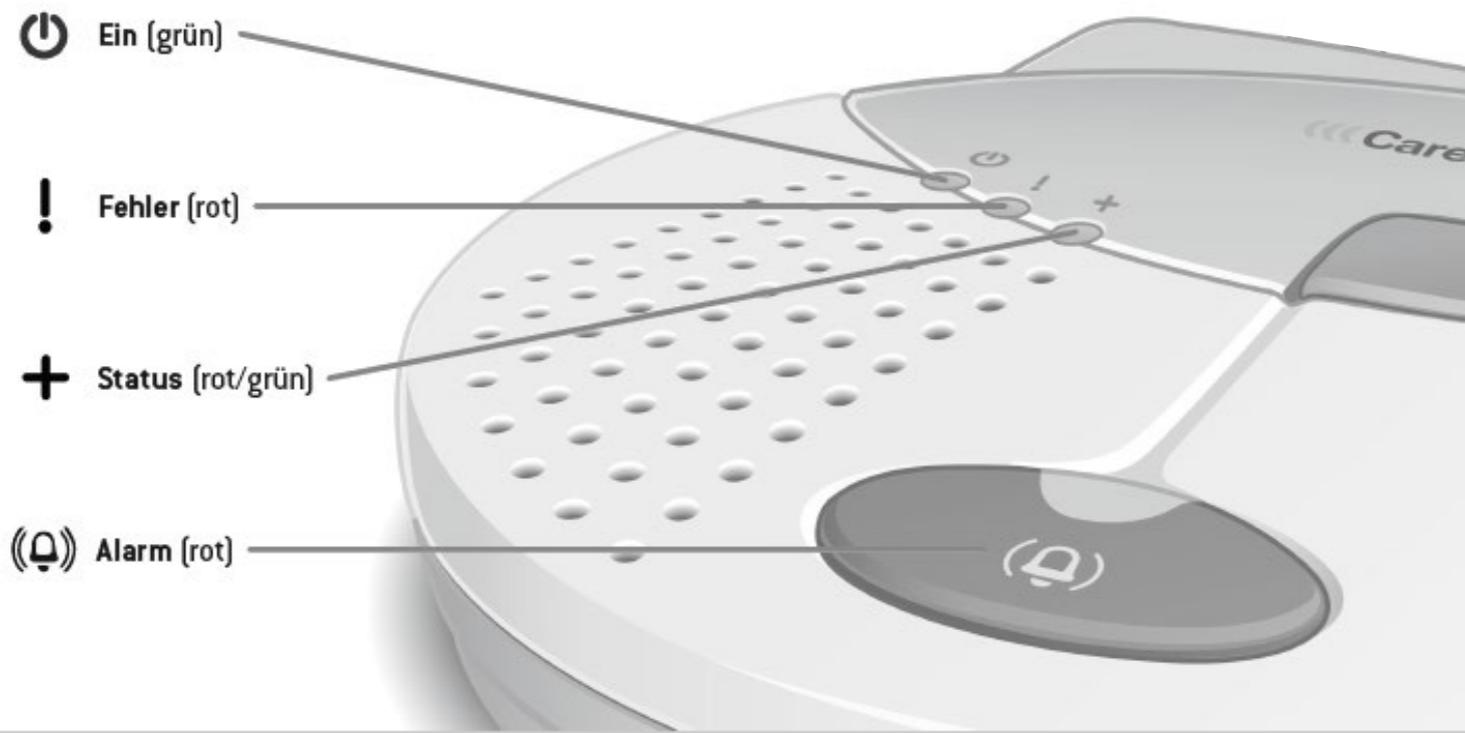

Anzeigenbedeutung

	Leuchtsignal	Bedeutung	Symbol
Notruf-Taste ①	leuchtet rot	Ruhemodus	((🔔))
	blinkt rot	Alarmzustand	
Stromnetz-Anzeige ⑥	leuchtet grün	Netzstrom (normaler Betrieb)	P
	blinkt grün	Netzausfall oder Kopplungsmodus	
Fehler-Anzeige ⑤	aus	normaler Betrieb	!
	leuchtet rot	keine Netzverbindung	
Status-Anzeige ④	aus	normaler Betrieb	+
	abwechselnd rot und grün	Abwesenheitsmodus	

Verwendung zu Hause

Tragen Sie das Funkarmband immer!

Im Alltag



Für die ideale Absicherung, tragen Sie den Handsender immer bei sich. Er lässt sich als Armband, Halskette und Gürtelclip tragen.

Im Badezimmer



Der Handsender ist dank integrierter Gummidichtung wasserfest, daher können Sie den Handsender problemlos beim Duschen und Baden tragen.

Im Garten



Nehmen Sie den Handsender mit nach draußen, **am besten** als Armband oder Halskette und legen Sie ihn z.B. auf den Gartentisch. Die Entfernung zwischen Handsender und Basisstation kann außerhalb der Wohnung bis zu 250 Meter betragen, um den Notruf auslösen zu können.

Umbauanleitung Handsender

Tragen als Halskette



Entfernen Sie das elastische Armband. Anschließend nehmen Sie die, auf beiden Seiten gelegenen, Armbandhalter raus, indem Sie sie nach oben schieben und dann rausziehen.

Nun stecken Sie den Anschluss für die Kordel an den Handsender und machen die Kordel fest. Wenn die Kordel fest an dem Handsender angebracht ist, können Sie nun den Verschluss ohne Aufsatz an die untere Seite anbringen.

Tragen als Armband



Stecken Sie die Kordel des Handsenders ab. Nehmen Sie anschließend die beiden Anschlüsse ab.

Nun können Sie auf beiden Seiten die Anschlüsse für das Armband anbringen.

Wenn die Anschlüsse für das Armband angebracht sind, können Sie das elastische Armband durch die Ösen schieben und am Verschluss festmachen.

Hinweis:

Der Verschluss der Kordel ist so konstruiert, dass er sich in Notsituationen automatisch öffnet, sollte fester daran gezogen werden.

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden:

 Tel.: 089 - 416 147 981 @ service@libify.de



Libify Technologies GmbH
Rüdesheimer Str. 11
80686 München

 www.libify.de

