



LIBIFY Notrufsystem


Inbetriebnahme | Kurzanleitung | wichtige Hinweise | Umbauanleitung



**Zu Ihrer Sicherheit
bitte aufmerksam lesen!**

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	3
Gerät aktivieren	4
Verwendung zu Hause	6
Verwendung unterwegs	7
Mobilgerät – Details und Leuchtanzeigen	8
Ladestation – Details und Leuchtanzeigen	10
Funkarmband – Details und Leuchtanzeigen	12
Umbauanleitung Funkarmband	14

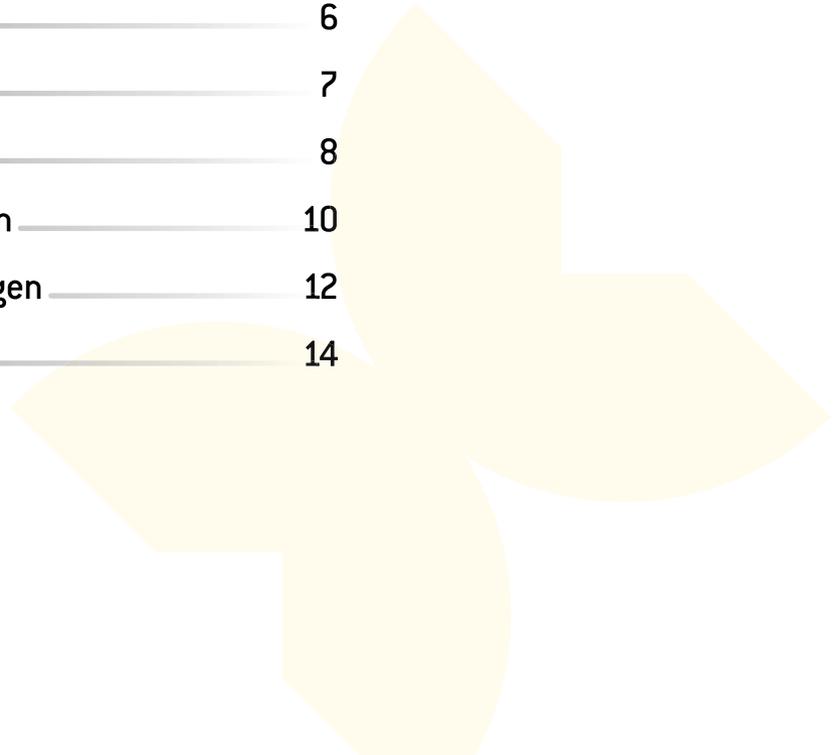

Lieferumfang

Mobilgerät



Funkarmband



Ladestation



1 SOS-Taste

3 Akku-Anzeige

5 Netzsignal-Anzeige

7 Lautsprecher

9 Ladkontakte

11 Such-Taste

2 Ein-/Ausschalttaste

4 Warnleuchte

6 Mikrofon

8 Armband-LED


10 Tagestaste
(optional)

12 Leuchtring

Gerät aktivieren



Aufbauen und anschließen

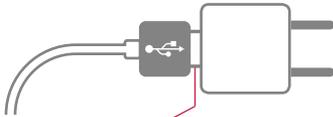

Hinweis:

Etwa 2 mm des USB-Steckers
bleiben sichtbar!

1. Verbinden Sie den Netzstecker mit dem USB-Kabel an Ihrer Ladestation und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.



2. Stellen Sie das Mobilgerät für mindestens 3 Stunden in die Ladestation. Es startet automatisch.

Stellen Sie die Ladestation an einen Ort in Ihrer Wohnung, an dem eine gute Verbindung zum Mobilnetz besteht, z.B. in die Nähe eines Fensters.

Funktion testen



1. Nehmen Sie Funkarmband und Mobilgerät für den ersten Test ca. 20 Minuten mit nach draußen. Testen Sie die Funktion auch innerhalb Ihrer Wohnung.



2. Drücken Sie den SOS-Knopf an Ihrem Funkarmband für 2 Sekunden.



3. Das Mobilgerät verbindet sich mit der Notrufzentrale. Es wird eine Sprechverbindung aufgebaut. Teilen Sie der Zentrale mit, dass es sich um einen Testnotruf handelt.

Wiederholen Sie den Testanruf mindestens einmal im Monat, um sicherzustellen, dass Ihr LIBIFY Notrufsystem betriebsbereit ist.

Verwendung zu Hause

Tragen Sie das Funkarmband immer!



Im Alltag



Lassen Sie das Mobilgerät möglichst in der Ladestation, damit es immer voll aufgeladen ist.



Im Badezimmer



Sie können das Funkarmband problemlos beim Duschen und Baden tragen. Wenn Mobilempfang in Ihrem Badezimmer besteht, empfehlen wir, das Mobilgerät mit ins Badezimmer zu nehmen und es z.B. neben das Waschbecken zu legen.



Im Garten



Nehmen Sie das Mobilgerät mit nach draußen und legen Sie es z.B. auf den Gartentisch. Die Entfernung zwischen Mobilgerät und Funkarmband kann außerhalb der Wohnung bis zu 250 m betragen, um den Notruf auslösen zu können.

Verwendung unterwegs



Nehmen Sie immer Funkarmband **und** Mobilgerät mit.
Nutzen Sie als Erinnerung gerne den Aufkleber in Ihrem LIBIFY Paket.



Sie können das Mobilgerät bequem in Ihrer Hosen-, Jacken- oder Handtasche aufbewahren. Die Entfernung zwischen Mobilgerät und Funkarmband kann außerhalb der Wohnung bis zu 250 m betragen, um über das Funkarmband einen Notruf auslösen zu können.

Das Funkarmband funktioniert nur in Verbindung mit dem Mobilgerät!

Mobilgerät – Details und Leuchtanzeigen



Funktionen

Notruf auslösen:

SOS-Taste ① min. 3 Sekunden drücken

- ▶ Der Notruf wird deutlich durch ein Tonsignal bestätigt, die SOS-Taste blinkt rot
- ▶ Mit Aufbau der Sprechverbindung leuchtet die SOS-Taste durchgehend rot

Ein-/Ausschalten:

Ein-/Ausschalttaste ② 5 Sekunden drücken

- ▶ Ein- und Ausschalten wird durch ein Tonsignal bestätigt

Wenige Minuten nach der Nutzung begibt sich das Mobilgerät in den Stromsparmodus. Es leuchten dann weder LED-Anzeigen noch Tasten. Drücken Sie zur Kontrolle der Anzeigen einmal kurz die SOS-Taste.

1 SOS-Taste 

3 Akku-Anzeige 

5 Netzsignal-Anzeige 

7 Lautsprecher

2 Ein-/Ausschalttaste 

4 Warnleuchte 

6 Mikrofon

Was tun, wenn ... ?

Technischer Support: 089 - 416 147 981

	Verhalten des Geräts	Bedeutung	Ihre Reaktion	Ihr Ergebnis
	Keine der Lampen leuchtet nach Knopfdruck	Der Akku des Geräts ist leer/entladen	Stellen Sie das Mobilgerät für mehrere Stunden in die Ladestation	Das Mobilgerät startet sich automatisch neu
	Alle Leuchtanzeigen pulsieren orange	–	Kontaktieren Sie den Support	–
	Ein-/Ausschalttaste ²			
	blinkt länger als 5 Minuten weiß	–	Kontaktieren Sie den Support	–
	Akku-Anzeige ³			
	leuchtet rot	Akkustand niedrig	Laden Sie Ihr Mobilgerät auf	Die Akku-Anzeige leuchtet grün
	Warnleuchte ⁴			
	pulsiert grün	Das Gerät erhält ein Service-Update	Dauert das Blinken mehr als eine Stunde, kontaktieren Sie den Support	Die Warnleuchte pulsiert nicht mehr grün
	leuchtet rot	Funktörung	Nehmen Sie das Gerät aus der Ladestation	Nach ca. 20 Minuten verbindet sich das Gerät wieder
	Netzsignal-Anzeige ⁵			
	leuchtet grün	Verbindung zum Mobilfunknetz wird aufgebaut	Warten Sie den Verbindungsaufbau ab	Die Verbindung zum Mobilfunknetz ist wieder hergestellt
	blinkt/leuchtet rot	Keine Verbindung zum Mobilfunknetz	Positionieren Sie Ihr Mobilgerät an einem anderen Platz	Die Netzsignal-Anzeige leuchtet grün

Ladestation – Details und Leuchtanzeigen



Funktionen

Notruf auslösen:

SOS-Taste **1** ca. 2 Sekunden drücken

- ▶ Der Leuchtring **12** pulsiert rot, sobald der Notruf ausgelöst wurde

Mobilgerät suchen:

Such-Taste **11** 2 Sek. drücken. Die Suchfunktion funktioniert in einem Radius von bis zu 30 m.

- ▶ Das Mobilgerät gibt mehrere Tonsignale ab

Hinweis:

Nach dem ersten Anschließen an die Stromversorgung dauert es ca. 60 Minuten bis die Ladestation betriebsbereit ist. Die Ladestation sollte immer am Strom angeschlossen sein.

1 SOS-Taste 

6 Mikrofon

9 Ladekontakte

11 Such-Taste

7 Lautsprecher

10 Tagestaste
(optional)

12 Leuchtring

Was tun, wenn ... ?

Technischer Support: 089 - 416 147 981

Verhalten des Geräts	Bedeutung	Ihre Reaktion	Ihr Ergebnis
Leuchtring 			
blinkt rot und grün im Wechsel	Ladestation nicht ausreichend geladen	Prüfen Sie die Stromverbindung und lassen Sie die Ladestation eine Stunde aufladen	Leuchtring  leuchtet durchgehend grün, das Gerät ist einsatzbereit
leuchtet rot	Ladestation nicht einsatzbereit	Führen Sie einen Neustart der Ladestation durch*	Leuchtring  leuchtet nach wenigen Minuten wieder durchgehend grün
leuchtet nicht	Ladestation gar nicht geladen	Prüfen Sie die Stromverbindung und lassen Sie die Ladestation eine Stunde aufladen	Leuchtring  leuchtet durchgehend grün, das Gerät ist einsatzbereit

* Neustart der Ladestation:

Drücken Sie die Such-Taste  und die Tageraste  gleichzeitig für ca. 5 Sekunden und lassen Sie die Tasten anschließend los. Die Ladestation startet neu, nach wenigen Minuten leuchtet der Leuchtring  durchgehend grün.

Funkarmband – Details und Leuchtanzeigen



Funktionen

Notruf auslösen:

SOS-Taste **1** min. 2 Sekunden drücken

- ▶ Die Armband-LED **8** blinkt grün
- ▶ Der Notruf wird deutlich durch ein Tonsignal bestätigt

- ▶ Das Funkarmband ist zum Baden und Duschen geeignet
- ▶ Die Reichweite zum Mobilgerät beträgt außerhalb von Gebäuden ca. 250 Meter und innerhalb von Gebäuden ca. 30 Meter
- ▶ Die Batterielebensdauer des Funkarmbands beträgt ca. 2 Jahre
- ▶ Die Übertragung von Funkarmband zu Mobilgerät erfolgt über ein gesichertes Funksignal

1 SOS-Taste

8 Armband-LED

Was tun, wenn ... ?

Technischer Support: 089 - 416 147 981

Verhalten des Geräts	Bedeutung	Ihre Reaktion	Ihr Ergebnis
Armband-LED 			
blinkt 1× grün, 1× rot	Das Armband ist außerhalb der Reichweite des Mobilgeräts	Bitte gehen Sie in die Nähe des Mobilgeräts und prüfen Sie die Verbindung durch Drücken der SOS-Taste erneut	Die Armband-LED leuchtet nach drücken wieder grün
blinkt 2× rot	Das Armband ist nicht mit dem Mobilgerät gekoppelt	Kontaktieren Sie den Support	Der technische Support führt eine Kopplung durch oder Sie erhalten ein Ersatzarmband

Umbauanleitung Funkarmband

Nachfolgend finden Sie zwei Anleitungen zum Umbau des Notrufarmbands – je nach Variante, wie Sie dieses tragen möchten.



Tragen als Halskette

1



Entfernen Sie auf beiden Seiten des Armbands den jeweiligen Metallstift, indem Sie diesen leicht eindrücken und im Anschluss vorsichtig herausziehen.

2




Anschließend nehmen Sie die Befestigung für die Halskordel und führen einen der beiden Metallstifte dort ein.

3




Nun stecken Sie eine Seite des herausstehenden Metallstifts in das Gehäuse des Notrufknopfs und montieren die Befestigung an den Notrufknopf.

4

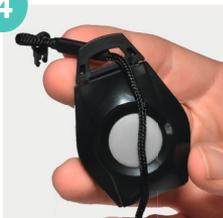

Fädeln Sie nun die Kordel in die Halsbefestigung ein.

5

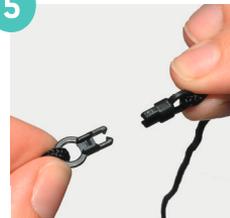

Schließen Sie die Kordel mit dem Sicherheitsverschluss bis Sie ein leises Klicken hören.

Hinweis:

Der Verschluss der Kordel ist so konstruiert, dass er sich in Notsituationen automatisch öffnet, sollte fester daran gezogen werden.

Lieferumfang:



SOS-Taste



Befestigung für Halskette



Halskordel




Armband (zweiteilig)

Unsere Empfehlung:
Wenn Ihnen der Umbau des Notrufarmbands schwierig erscheint, empfehlen wir, dies bei einem Uhrmacher durchführen zu lassen.



Tragen als Armband

1

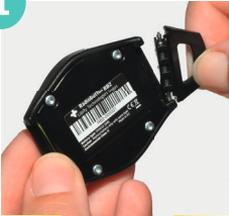

Lösen Sie die Befestigung der Halskordel, indem Sie den Metallstift vorsichtig entfernen. Bitte beachten Sie, dass beide Seiten des Metallstifts versenkbar sind.

2



Setzen Sie den Metallstift in eine Seite des Notrufarmbands ein.

3



Nun stecken Sie den Stift in das Loch im Gehäuse des Notruftknopfs auf einer Seite hinein. Der Stift ist an beiden Enden versenkbar, damit das Armband einfach und schnell montiert werden kann. Sollte der Stift sich nicht in das Gehäuse führen lassen, muss auch das andere Ende des Stifts ein wenig eingedrückt werden.

4



Anschließend nehmen Sie das zweite Armband und verfahren auf gleiche Art und Weise wie mit dem ersten Armband.

Tipp:

Sie können den SOS-Knopf mit jedem anderen Armband in der entsprechenden Größe kombinieren. Gestalten Sie das Notrufarmband ganz nach Ihrem Geschmack, um es mit Freude zu tragen.

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden:

 Tel.: 089 - 416 147 981  service@libify.de



Libify Technologies GmbH
Rüdesheimer Str. 11
80686 München

 www.libify.de

